


NORMAG

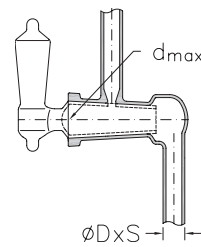

**SH-Einweg-
Hochvakuumhähne**

**SH one way
high vacuum stopcocks**

	Nenngröße NS Nominal size NS	Rohr D x S [mm] Tube D x S [mm]	Bohrung [mm] Bore [mm]	dmax [mm]	Artikelnr. komplett Article no. complete
NORMAG	2	9,0 x 1,5	2	14,5	SHSG0214
	3	9,0 x 1,5	3	14,5	SHSG0314
	4	11,0 x 1,5	4	18,8	SHSG0418
	6	13,0 x 1,5	6	21,5	SHSG0621
	8	15,0 x 1,8	8	24,0	SHSG0824
	10	16,0 x 1,8	10	29,2	SHSG1029
	15	22,0 x 1,8	15	45,0	SHSG1545

SH-Einweg-Hochvakuumhahn­hülsen, geschliffen SH one way high vacuum stopcock sleeves, ground					
	Nenngröße NS Nominal size NS	Rohr D x S [mm] Tube D x S [mm]	Bohrung [mm] Bore [mm]	dmax [mm]	Artikelnr. Article no.
NORMAG	2	9,0 x 1,5	2	14,5	SHSG0214G
	3	9,0 x 1,5	3	14,5	SHSG0314G
	4	11,0 x 1,5	4	18,8	SHSG0418G
	6	13,0 x 1,5	6	21,5	SHSG0621G
	8	15,0 x 1,8	8	24,0	SHSG0824G
	10	16,0 x 1,8	10	29,2	SHSG1029G
	15	22,0 x 1,8	15	45,0	SHSG1545G

SH-Ersatzküen SH spare keys			
	Nenngröße NS Nominal size NS	Bohrung [mm] Bore [mm]	Artikelnr. Küen Article no. stopcock keys
NORMAG	2	2	SHOG0214K
	3	3	SHOG0314K
	4	4	SHOG0418K
	6	6	SHOG0621K
	8	8	SHOG0824K
	10	10	SHOG1029K
	15	15	SHOG1545K

- NORMAG-Feinschliff 1200er-Körnung
 - Hahnhülse und Hohlglasküken in Handarbeit bei Normag in Ilmenau hergestellt, garantiert höchste Qualität
 - Langlebig und leichtgängig
 - Benötigt weniger Schlifffett und klebt um ein vielfaches weniger fest
 - Hochvakuumdicht
 - Auch bei Temperaturwechseln immer dicht
 - Mit Gummi-Hahnsicherung
 - Temperaturbeständigkeit: + 200°C - nicht isoliert, Minustemperatur limitiert durch Schlifffett/dichtung
 - Druckbeständigkeit: -1/+0,1 barg
 - Material: Borosilikatglas 3.3
 - Material Hahnsicherung: FKM, -40/+180°C
- *NORMAG fine-grinding 1200 grit*
 - *Stopcock sleeve and hollow glass stopcock keys handmade by Normag in Ilmenau, Germany, guarantees highest quality*
 - *Durable and smooth running*
 - *Requires less grinding grease and is much less sticky*
 - *High vacuum tight*
 - *Always tight, even with temperature changes*
 - *With rubber tap safety device*
 - *Temperature resistance: + 200°C - not insulated, minus temperature limited by grinding grease/sealing*
 - *Pressure resistance: -1/+0.1 barg*
 - *Material: borosilicate glass 3.3*
 - *Material tap safety device: FKM, -40/+180°C*

Hinweis: Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.

Important: For glass articles which differ from the original shape after further processing, the permissible data must be determined in accordance with the technical rules and regulations.